



# LANCETTES

Une offre adaptée  
à tous vos besoins





DOCLANCETTE 11/2017



**LABELIANS**  
Groupe CML-ID

# VITREX

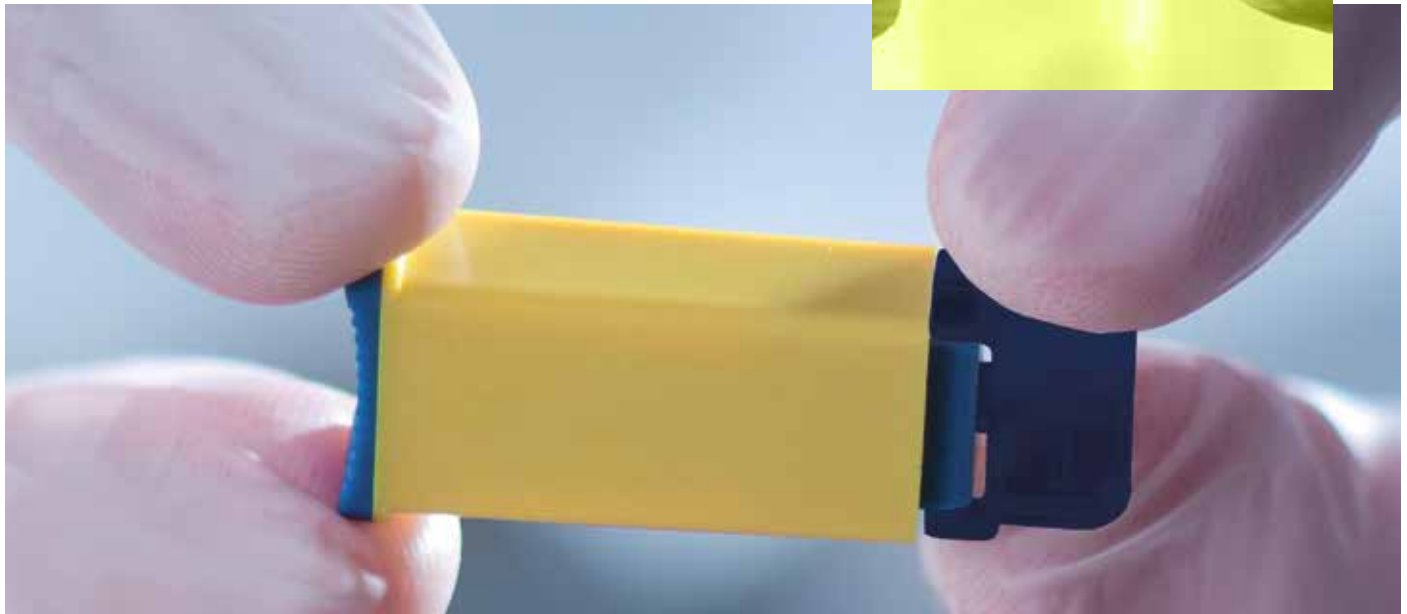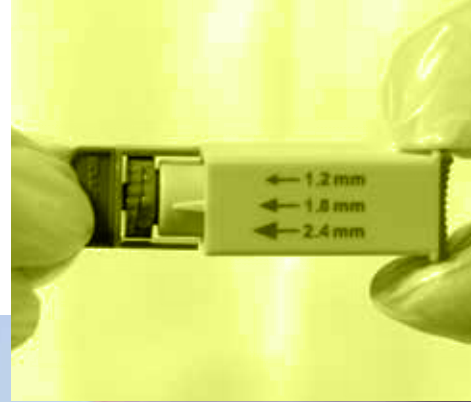

La gamme de lancettes Vitrex® offre un large choix de lancettes sécuritaires à usage unique qui répondent à tous les besoins des utilisateurs et aux exigences des analyses.

## LANCETTES SÉCURITAIRES

Activation par pression pour une ponction simple, confortable et sécurisée

### 100% sécuritaire

- ◆ Plus de risque d'AES, la lame ou l'aiguille est entièrement protégée avant et après utilisation
- ◆ Le blocage automatique du dispositif empêche la réutilisation et élimine les contaminations croisées
- ◆ Stérile

### Confort du patient


- ◆ Incision rapide et peu douloureuse
- ◆ Aiguille à triple biseau de haute qualité qui limite le traumatisme
- ◆ Grand choix de profondeurs de pénétration pour un prélèvement optimal chez l'adulte et l'enfant

### Simplicité d'utilisation

- ◆ Garanti un flux sanguin reproductible à chaque utilisation
- ◆ Incision calibrée
- ◆ Dispositif pré-armé
- ◆ Prêt à l'emploi : utilisable sans stylo auto piqueur, sans assemblage ni réglage
- ◆ Ergonomique et intuitif
- ◆ Code couleur

## Lancette Vitrex® Sterilance Press II

- ◆ Diamètre de 18 à 30G
- ◆ Profondeur d'incision de 1,8 à 2,8mm

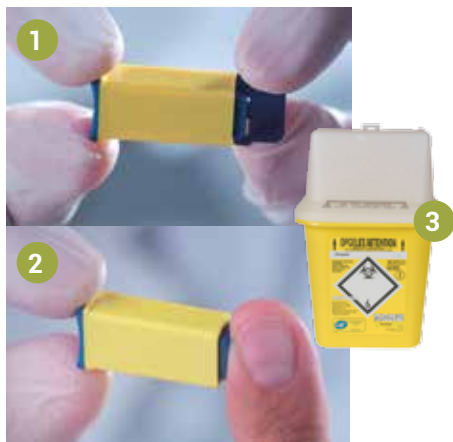


1. Tourner délicatement le capuchon de protection pour le retirer
2. Sélectionner le site de ponction et appuyer avec fermeté le dispositif contre le site afin de libérer la lancette
3. Jeter la lancette de sécurité dans un conteneur de sécurité approprié



Version	Couleur	Diamètre (gauge)	Diamètre (en mm)	Profondeur incision (en mm)	Cond't mini de vente	Réf.
Lame	● Vert	18	-	1,8	100	<b>LSPRESS18G1.8</b>
Aiguille	● Bleu	21	0,81	1,8	100	<b>LSPRESS21G1.8</b>
Aiguille	● Orange	21	0,81	2,2	100	<b>LSPRESS21G2.2</b>
Aiguille	● Rose	21	0,81	2,8	100	<b>LSPRESS21G2.8</b>
Aiguille	● Jaune	26	0,46	1,8	100	<b>LSPRESS26G1.8</b>
Aiguille	● Violet	28	0,36	1,8	100	<b>LSPRESS28G1.8</b>
Aiguille	● Turquoise	30	0,30	1,8	100	<b>LSPRESS30G1.8</b>

## Lancette Vitrex® Sterilance Flex

- ◆ 3 profondeurs de pénétration différentes
- ◆ 3 produits en un
- ◆ Diamètre de 26 et 28G
- ◆ Profondeur d'incision de 1,2 à 2,4mm

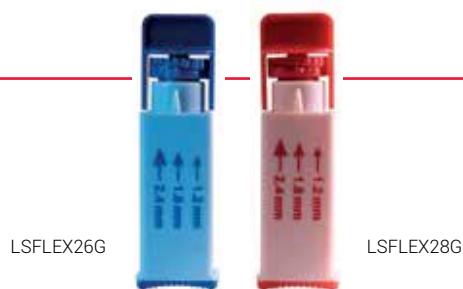

1. Tourner délicatement le capuchon de protection pour le retirer
2. Régler la pointe de façon à choisir la profondeur appropriée
3. Appuyer fermement sur la lancette de sécurité réglable au niveau du site choisi pour activer le dispositif
4. Jeter la lancette de sécurité réglable dans un conteneur de sécurité approprié

Version	Couleur	Diamètre (gauge)	Cond't mini de vente	Réf.
Aiguille	● Bleu	26	100	<b>LSFLEX26G</b>
Aiguille	● Rouge	28	100	<b>LSFLEX28G</b>

VITREX



## LANCETTE MANUELLE

### Ponction sécurisée

- ◆ Capuchon de sécurité large et long pour assurer l'intégrité avant utilisation et pour un retrait facile
- ◆ Stérile

### Confort du patient

- ◆ Flux sanguin fluide
- ◆ Traumatisme minime

### Simplicité d'utilisation

- ◆ Forme ergonomique
- ◆ Code couleur
- ◆ Boîtes équipées d'un dispositif de distribution



## Lancette Vitrex® Soft

- ◆ Diamètre de 23, 28 et 30G
- ◆ Profondeur d'incision de 3,3mm



LSOFT23G



LSOFT28G



LSOFT30G

Version	Couleur	Diamètre (gauge)	Diamètre (en mm)	Profondeur incision (en mm)	Condts mini de vente	Réf.
Aiguille	<span style="color: #00A0C0;">●</span> Bleu ciel	23	0,65	3,3	200	<b>LSOFT23G</b>
Aiguille	<span style="color: #D62728;">●</span> Rouge	28	0,38	3,3	200	<b>LSOFT28G</b>
Aiguille	<span style="color: #2CA02C;">●</span> Vert	30	0,31	3,3	200	<b>LSOFT30G</b>

### Compatible avec le stylo autopiqueur Vitrex® Compact Eject

Stylo auto piqueur avec bouton d'éjection Vitrex® Compact Eject

- ◆ Compatible avec la plupart des marques de lancettes courantes sur le marché
- ◆ 6 profondeurs de piqûre pour une adaptation à divers types de peaux
- ◆ Le bouton d'éjection permet d'enlever la lancette sans la toucher



1. Régler la profondeur souhaitée entre 1 (minimum) et 6 (maximum)
2. Tirer le curseur gris pour activer le mécanisme
3. Retirer l'embout protecteur
4. Éjecter la lancette dans un container adapté

Couleur	Nombre de profondeurs	Condts mini de vente	Réf.
<input type="radio"/> Blanc	6	1	<b>STYLANCETE</b>

VITREX



Lancette de sécurité néonatale pour une incision  
chez les nouveau-nés et prématurés

## LANCETTE PÉDIATRIQUE

Flux sanguin optimal pour le recueil  
d'un volume suffisant en toute  
sécurité

- ◆ L'incision contrôlée de la lame est conçue pour optimiser le flux sanguin
- ◆ **Double sécurité avant et après utilisation :**
  - Une languette de sécurité protège le bouton d'activation
  - Une fois l'incision effectuée, le bouton reste bloqué automatiquement
- ◆ Sécurité du patient : dispositif stérile, ne peut pas être réutilisé

Profondeur de pénétration minimum  
et compression minimale des tissus

- ◆ Contrôle de la profondeur de pénétration
- ◆ Dispositif pré-armé
- ◆ Confort du patient : lame ultra-tranchante et incision rapide pour un traumatisme minimum et une cicatrisation rapide

## Lancette Vitrex® Steriheel Baby

- ◆ Profondeur de 0,65 à 2,00mm
- ◆ Longueur d'incision de 1,40 à 3,00mm
- ◆ Code couleur



1. Retirer la tige de sécurité
2. Utiliser la position de référence pour le prélèvement de sang au talon des nouveau-nés
3. Lever le pied du bébé pour l'amener dans une position appropriée, appuyer la fente de la lame contre la surface du talon, puis activer la lancette
4. Effectuer le prélèvement
5. Jeter la lancette de sécurité dans un conteneur de sécurité approprié

Version	Couleur	Profondeur incision (en mm)	Cond't mini de vente	Réf.
Lame	● Rose	1,14	50	<b>LSBABY03</b>
Lame	● Vert	0,65	50	<b>LSBABY04</b>
Lame	● Jaune	1	50	<b>LSBABY05</b>
Lame	● Bleu	2	50	<b>LSBABY06</b>
Lame	● Orange	0,85	50	<b>LSBABY11</b>

**PENSEZ-Y !**

**KIMA<sup>®</sup> TEST<sup>®</sup>**



## **PÂTE SILICONÉE HEMOFORM**

Particulièrement adaptée aux prélèvements pédiatriques

- ◆ Favorise la formation de larges gouttes de sang qui peuvent ainsi être collectées par des tubes capillaires
- ◆ Retarde la coagulation
- ◆ Préviend la contamination du sang par les fluides tissulaires et permet de prélever une plus grande quantité de sang qu'avec des méthodes conventionnelles



Désignation	Cond. mini de vente	Réf.
Pâte siliconée Hemoform <sup>®</sup> tube de 3g	1	<b>C0603723</b>

**Nos équipes sont à votre disposition et à votre écoute pour toute demande :**

**0 800 970 724**

Service & appel gratuits

### **SERVICE CLIENTS :**

Email : [serviceclient@labelians.fr](mailto:serviceclient@labelians.fr)

**SERVICE CLIENTS NEMOURS**  
*Enseignement, hospitaliers, industrie, laboratoires vétérinaires, Recherche...*

1, rue des Palis  
77140 NEMOURS  
Fax : 01 64 78 14 69

### **SERVICE CLIENTS PUSIGNAN**

*Laboratoires d'anatomo-pathologie privés, LBM privés, professions libérales*

ZAC Satolas Green - Pusignan  
Bâtiment Cap Arrow  
69881 MEYZIEU Cedex  
Fax : 04 72 22 43 28



**LABELIANS**

Groupe CML-ID

### **SERVICE MAINTENANCE & METROLOGIE :**

Email : [hotlinesav@labelians.fr](mailto:hotlinesav@labelians.fr)

ZAC Satolas Green - Pusignan  
Bâtiment Cap Arrow  
69881 MEYZIEU Cedex  
Fax : 04 72 22 43 13