

PRENEZ LE CONTRÔLE SUR LA QUALITÉ DE VOTRE EAU



Le tout premier laboratoire de poche réutilisable capable de reproduire les conditions de culture d'un laboratoire d'analyses microbiologiques.

- ❖ **Toute eau de consommation est exposée à un risque de contamination bactériologique.** Contrôler certains points précis du réseau d'eau, ou certaines installations plus sensibles, est essentiel pour **assurer la sécurité des usagers.**
- ❖ Les légionelles se développent particulièrement dans les eaux dont la température est comprise entre 25°C et 45°C et sont responsables d'infections pulmonaires.
- ❖ Les coliformes (dont E. coli) sont le signe d'une contamination fécale, animale ou humaine. Ils peuvent entraîner des infections gastro-intestinales plus ou moins sévères.

Votre besoin : tests par type d'eau



Installation eau
chaude / eau
froide

Coliformes
Legionella



Piscine / Spa

Coliformes
Legionella



Climatisation /
Brumisateur

Coliformes
-



Puits / Citernes

Coliformes
Legionella



Espace de
baignade
extérieur

-
Legionella

La solution : Mini-Lab, le premier incubateur de poche capable de reproduire les conditions de culture d'un vrai laboratoire !

-  **Fiable** : des résultats équivalents à l'analyse en laboratoire
-  **Rapide** : des résultats en seulement 24 à 48h
-  **Protocole simplifié** : un protocole réalisable par tous




LABELIANS
Groupe CML-ID

La solution : Mini-Lab



- ❖ Grâce à son **incubateur de poche**, pas plus grand qu'un smartphone, **il permet aux bactéries de se multiplier dans des conditions de température idéales à leur croissance.**
- ❖ Utilisée par les laboratoires, cette **technologie est la plus fiable pour mesurer précisément la concentration en bactéries d'un échantillon d'eau.**

À associer aux kits Water Test

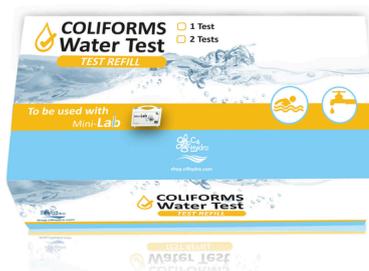

En savoir plus !



- Résultats **rapides en 24h**
- **Lecture facile du résultat** : la solution change de couleur
- Date limite d'utilisation : 12 mois
- Seuil de détection : < 0.1 UFC*/ml



En savoir plus !



- Résultats **rapides dès 48h**
- **Lecture facile du résultat** sur bandelette
- Date limite d'utilisation : 12 mois
- Seuil de détection:
- 1 UFC*/ml pour 72-76h d'incubation
- 10 UFC*/ml pour 48-52h d'incubation

(*Unités Formant Colonie)

Informations de commande

Référence	Description	Nombre de test	Unité de vente
MINILAB	Mallette Mini-Lab pour analyses d'eau	-	1
KITMINILABCOLIF	Kit Water Test pour coliformes sur Mini-Lab	1	1
KITMINILABLEGIO	Kit Water Test pour <i>Legionella</i> sur Mini-Lab	1	1